

Opreste sangerarea in 3 minute!

- Tromboguard® este un pansament pentru stoparea sangerarii
- activitatea hemostatica a pansamentului este imediata, opreste sangerarea in 3 minute de la aplicarea pe rana – confirmat clinic
- pansamentul are 3 straturi, fiecare avand o functie diferita:
 - stratul activ este o combinatie de ingrediente active (chitosan, alginat si argint), ce sunt responsabile cu oprirea sangerarii
 - stratul interior este din spuma de poliuretan, ce colecteaza sangele
 - stratul exterior este din membrana de poliuretan, ce previne scurgerea laterala a sangelui si izoleaza rana
- pansamentul poate fi tinut pe rana timp de 24 de ore
- mai multe informatii despre pansament gasiti in brosură informativa

Utilizare:

Pansamentul este folosit pentru stoparea sangerarii in urmatoarele tipuri de rani:

- traumatice
- postoperatorii
- rezultate in urma donarilor de grefe de piele si chirurgie reconstructiva
- acordarea primului ajutor
- de glont
- rezultate in urma accidentelor rutiere


Ideale pentru trusele de prim ajutor, servicii medicale de urgenta si pe campul de lupta.

Tipuru:

- steril

Marimi si ambalare:

- sterile 10 cm x 10 cm, ambalate cate 5 buc
- alte marimi disponibile la cerere

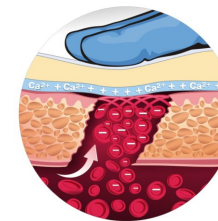

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>