

Benzile urologice subtiri reprezinta ultima generatie de implanturi utilizate in tratamentul incontintentei urinare de stres la femei. Benzile urologice sunt tricotate din fire monofilament de polipropilena, transparente si albastre. Liniile de orientare albastre dispune de-a lungul benzii faciliteaza procesul de implantare si sporesc vizibilitatea implantului in campul de operare.

Benzile sunt prevazute cu „manere” albastre, la ambele capete, ce permit fixarea pe un aplicator adecvat. Manerele sunt fabricate din fire monofilament de polipropilena.

Datorita masei ultra-usoare a suprafetei, a marginilor atraumatice, a parametrilor de rezistenta excelenti, a elasticitatii ridicate si a biocompatibilitatii foarte bune, produsul poate fi utilizat in siguranta si eficient in tratamentul chirurgical al incontintentei urinare.

Utilizare:

- pentru tratamentul chirurgical al incontintentei urinare de stres, prin folosirea metodei TVT sau TOT



Tipuri:

- sterile (sterilizate cu etilenoxid)

Marimi si ambalare:

- 30 cm si 45 cm lungime
- ambalate individual in pungi hartie-film si apoi in cutii de carton

Mai multe informatii la: [www.dallop-nm.com](http://www.dallop-nm.com)

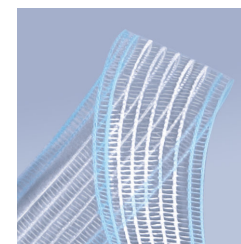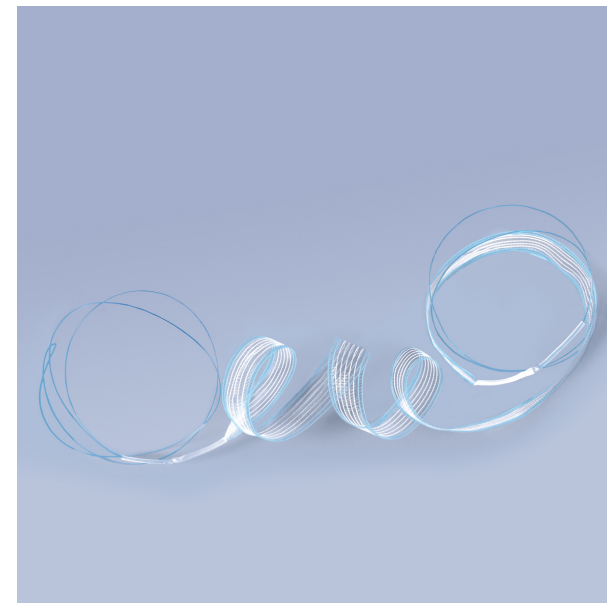

**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>