Matoset set conectare dializa – metoda de aplicare

Exemplu de set dializa MA-991-ZEST-487

1




Se recomanda spalarea mainilor inainte de inceperea procedurii (medicul specialist si pacientul).

2



Pentru efectuarea procedurii se pregateste un dezinfectant, un garou, branulele corespunzatoare si se stabileste inceputul si sfarsitul procedurii.

3

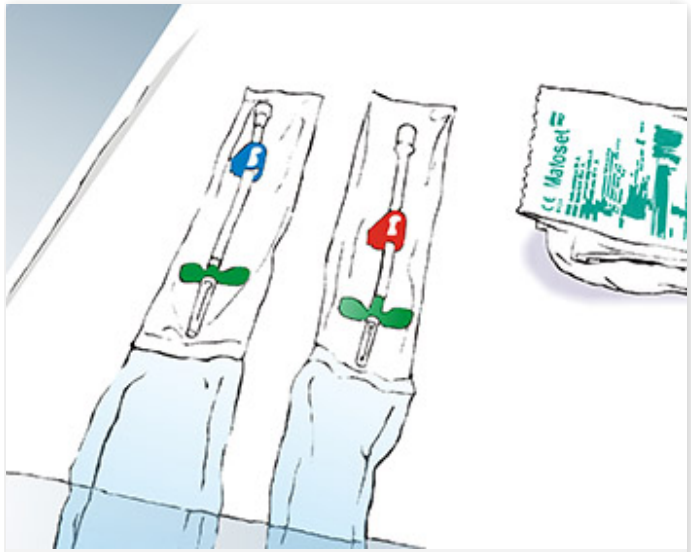

Se desfac ambalajele branulelor si cel al setului conectare dializa, se aplica garoul pe bratul pacientului dar nu se strange.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4



»

5

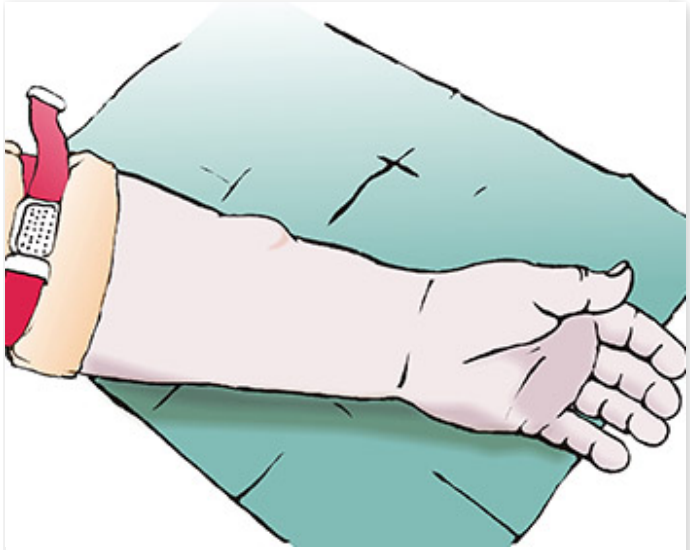

Se scoate campul steril si se pune sub antebratului pacientului.

6



Se pune manusa in mana stanga si cealalta se aseaza pe partea sterila a ambalajului desfacut.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

7



Se dezinfecteaza antebratul pacientului, folosind lichidul dezinfectant pregatit anterior si pansamentele sterile din set.

8



»


9



»

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

10

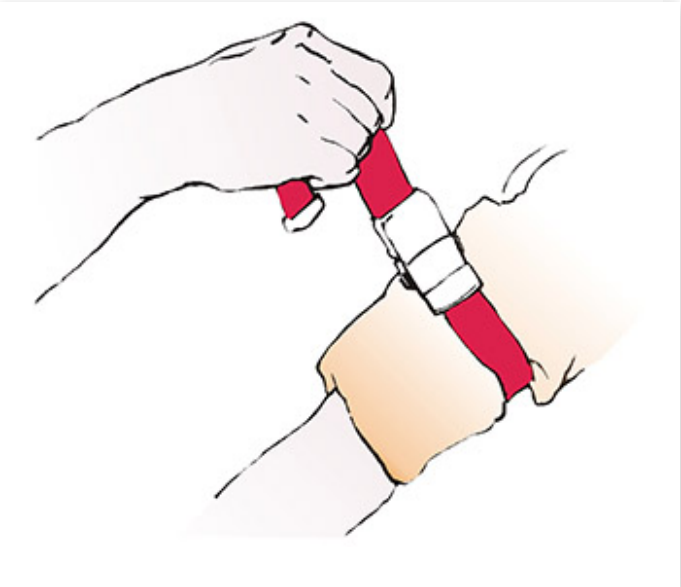


Se strange garoul.

11



Se pune manusa dreapta.


12

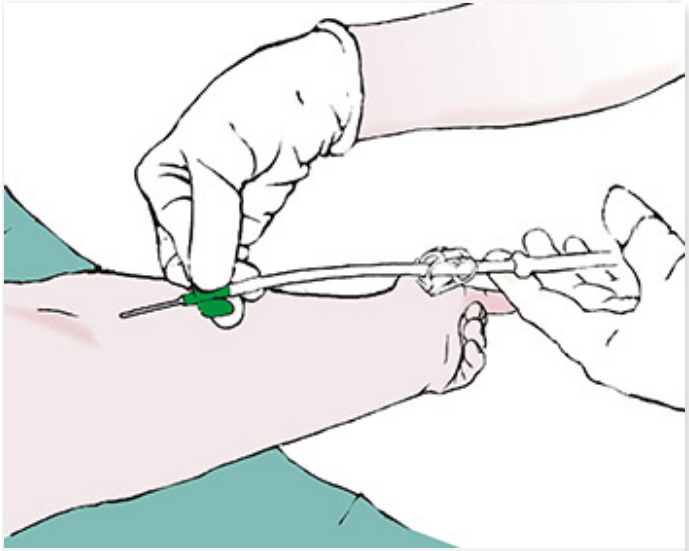

Se introduc branulele in vene.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

13

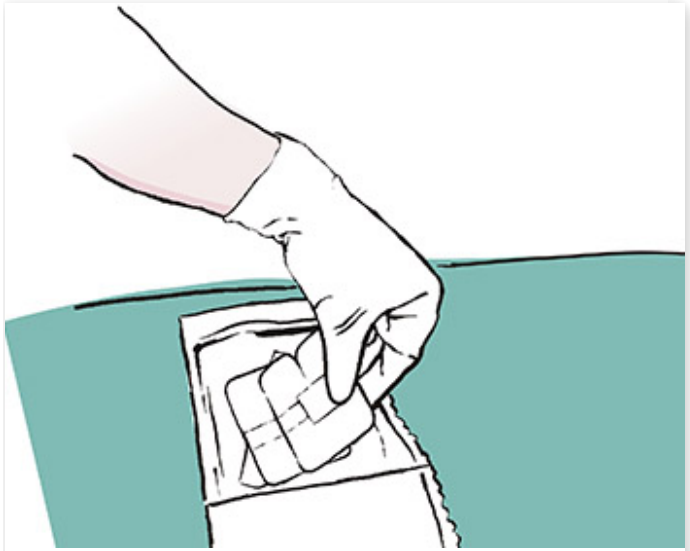


Dupa inserarea fiecarei branule, se fixeaza cu pansamentul special pentru branule (care se gaseste in set).

14

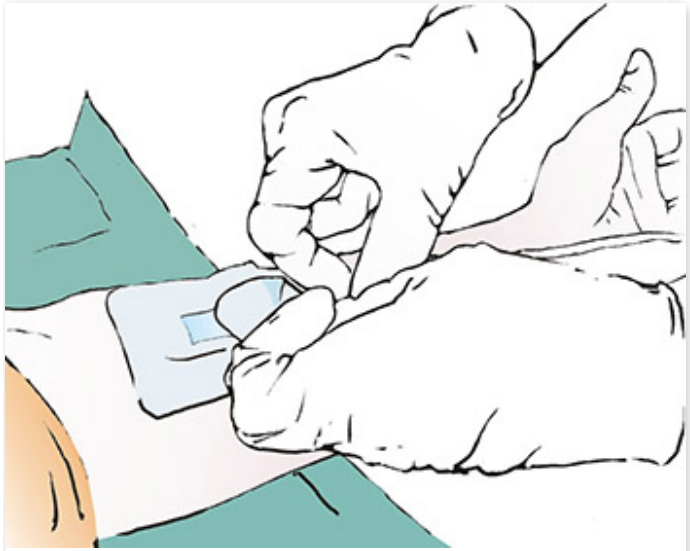

»


15

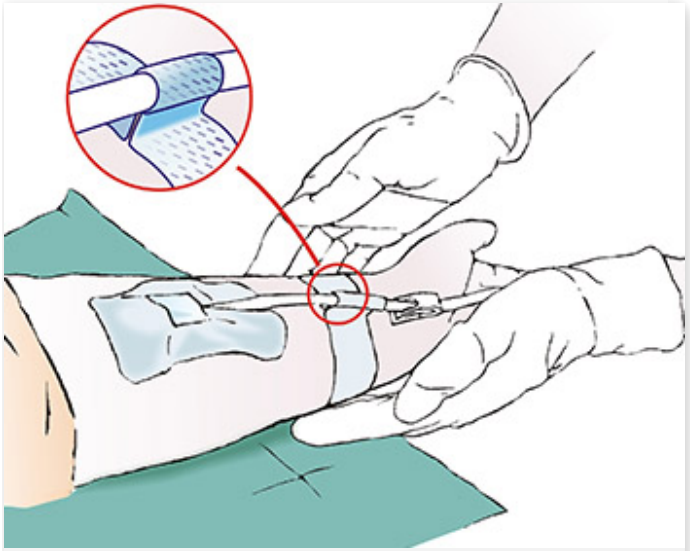

La sfarsit se fixeaza tubul branulei cu benzile adezive, din netesut.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

16

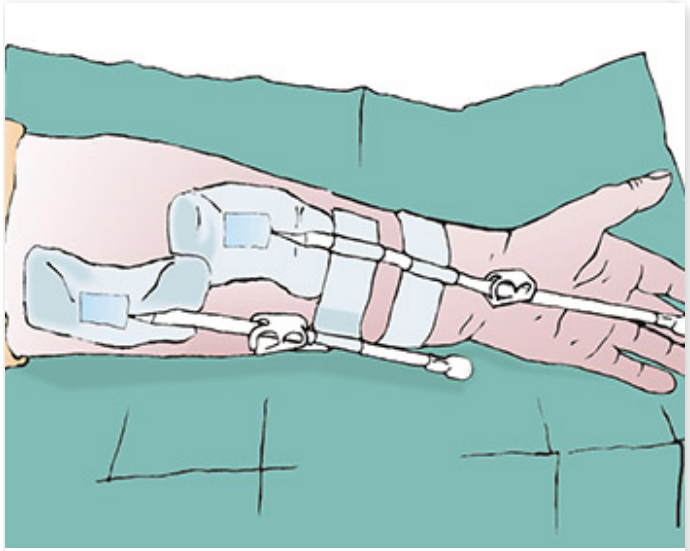

Acum pacientul este conectat la „rinichiul artificial”. Dializa dureaza intre 3 si 4 ore.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026