Matoset set deconectare dializa – metoda de aplicare

Exemplu de set dializa MA-991-ZEST-488.

1



Se recomanda spalarea mainilor, inainte de sfarsitul procedurii (medicul specialist).

2



Se desface setul deconectare dializa.

3



Se pune o manusa pacientului.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4




Apoi medicul specialist isi pune ambele manusi.

5

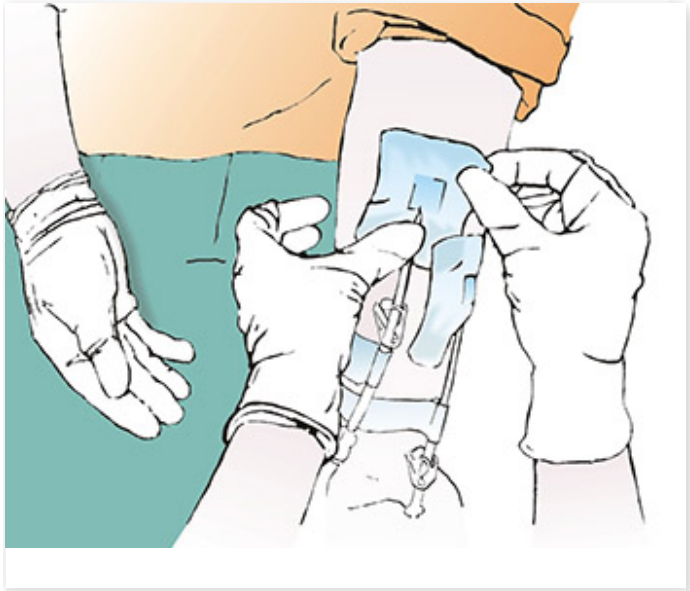

Se scot succesiv, iar cu ajutorul pacientului se protejeaza cu pansamente locul injectiilor .


6

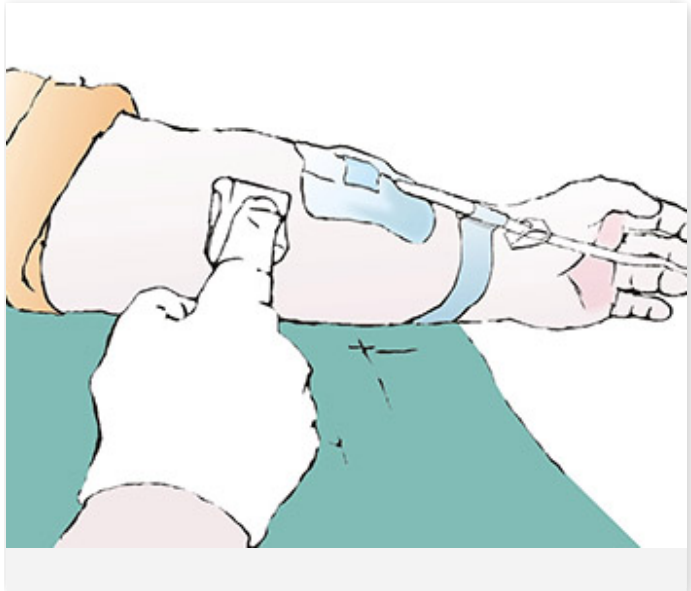

»

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

7

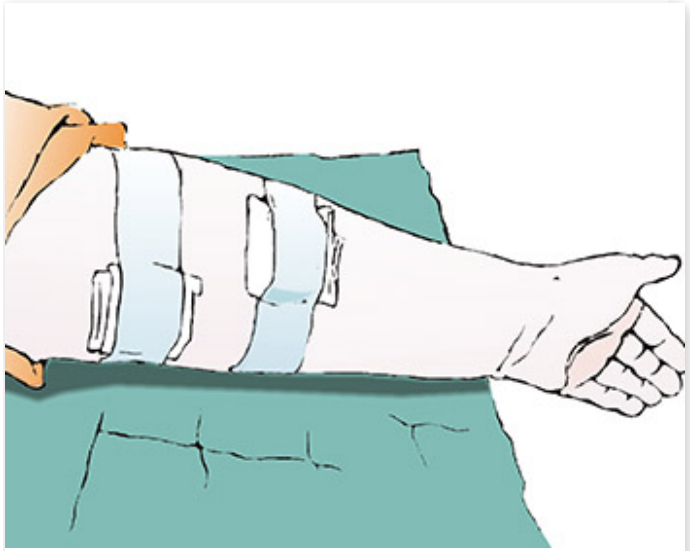

Dupa scoaterea ambelor branule, zonele injecatate se bandajeaza utilizand pansamente din netesut si benzi adevize.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026