
Pregatirea setului de by-pass Matodrape

1



Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set peste.

2

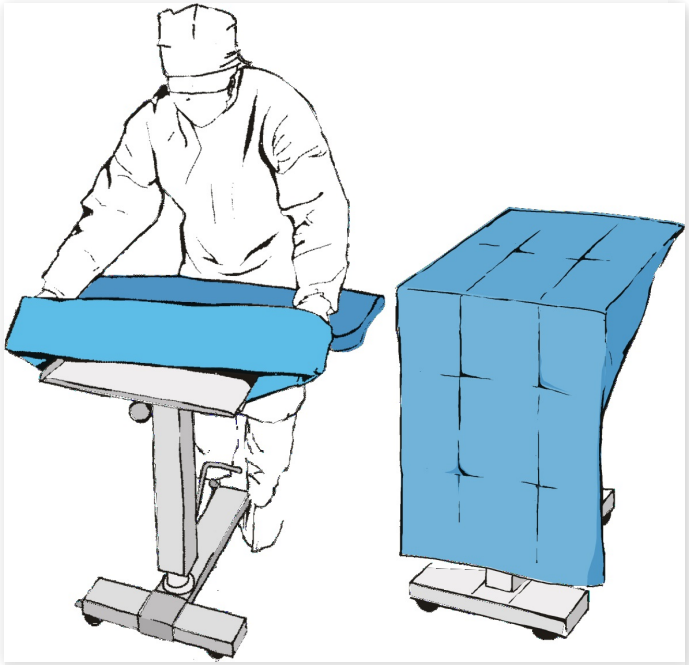

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3



Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4

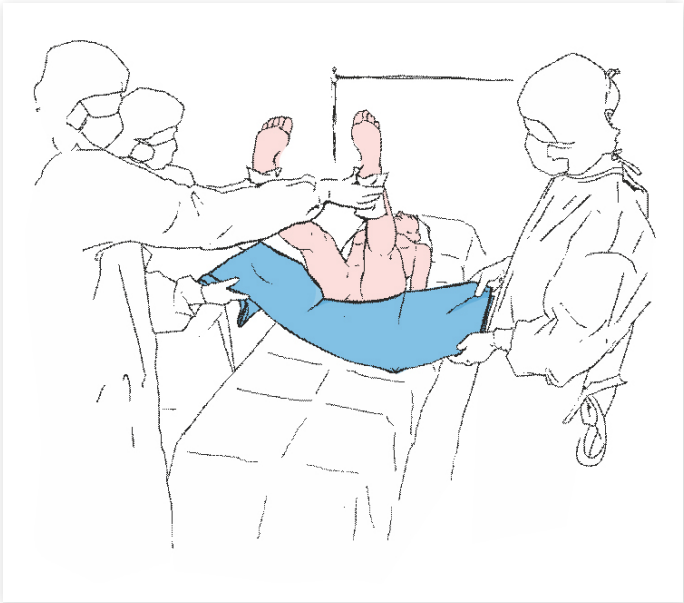


Cu ajutorul prosoapelor incluse in set, ridicati picioarele pacientului ai asezati sub ele campul cu huse pentru picioare.

5

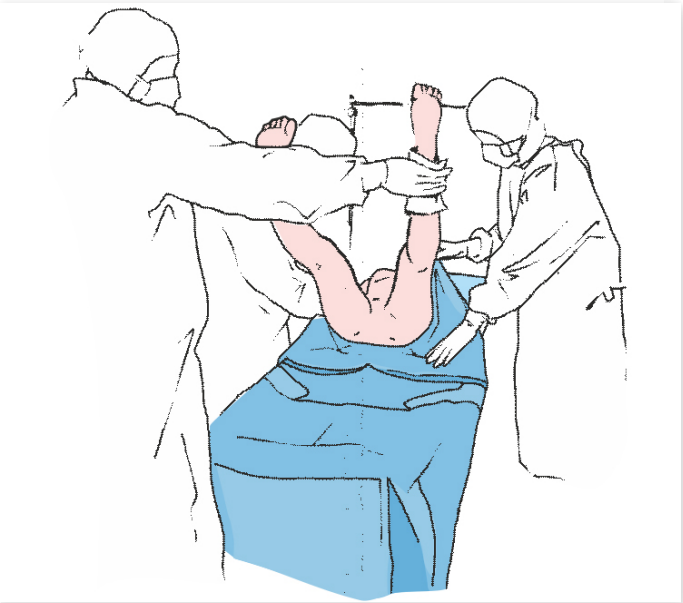

Intindeti campul spre capatul inferior al mesei de operatie.


6

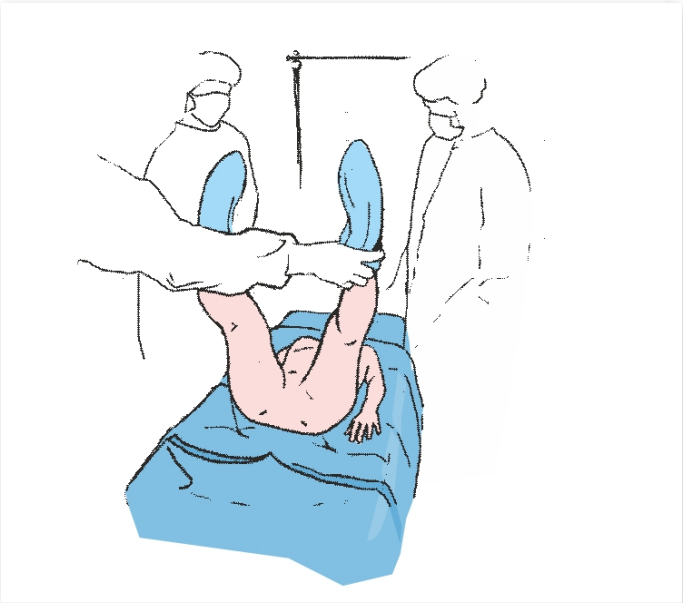

Acoperiti picioarele pacientului cu husele, fixandu-le ferm in jurul gleznelor.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

7

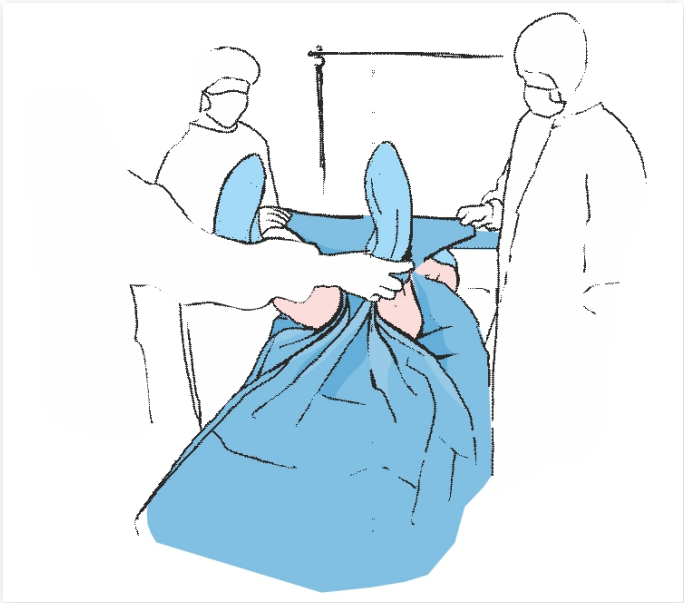


Treceti husa printre coapsele pacientului, ...

8



... scoateti hartia de protectie si lipiti pe abdomenul inferior.


9

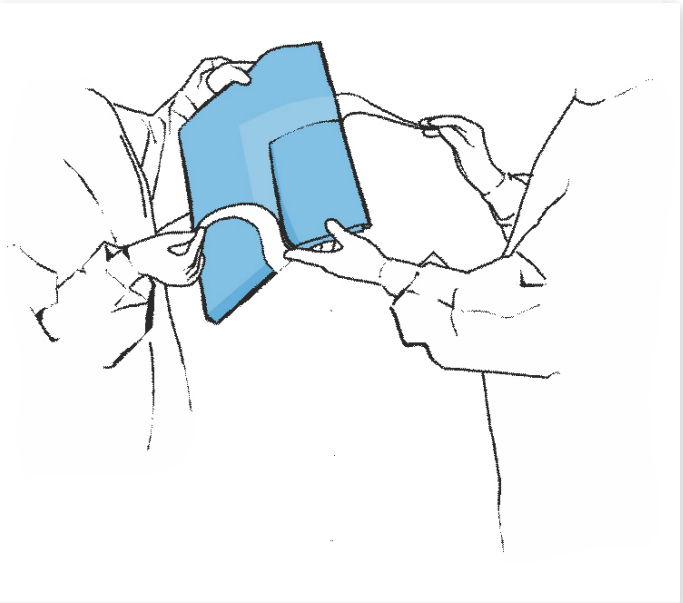

Indepartati hartia de protectie de pe orificiul celui de-al doilea camp principal.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

10

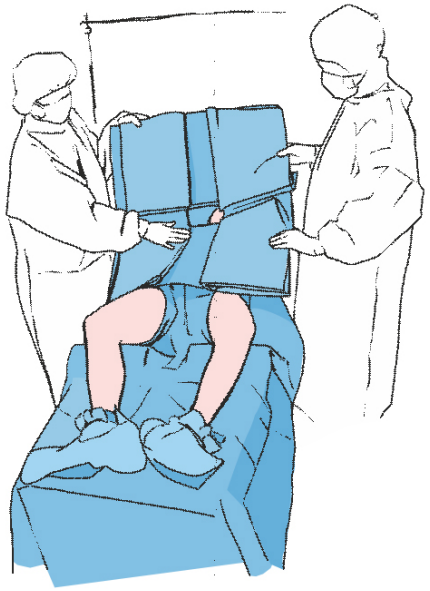


Lipiti pe piept, pentru a determina campul operator, apoi presati pe zona cu adeziv pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului.

11

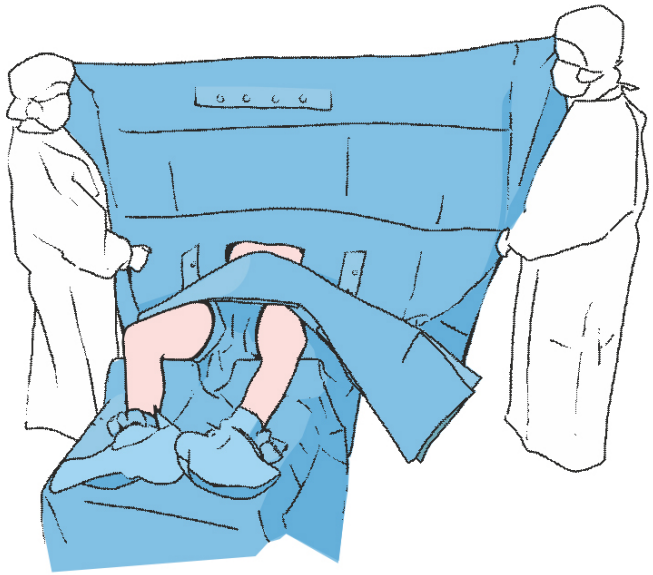

Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului peste capul pacientului, spre monitorul de anestezie, trecand campul peste el si formand astfel un paravan.


12

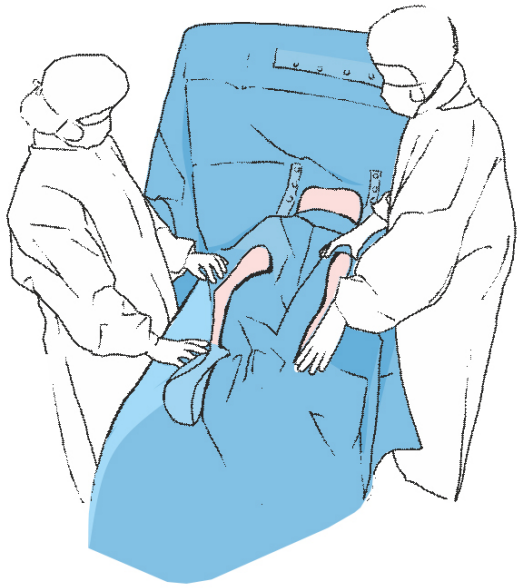

Desfaceti partea inferioara a campului spre capatul inferior al mesei de operatie, folosind doua deschideri longitudinale pentru a determina campul operator.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

13

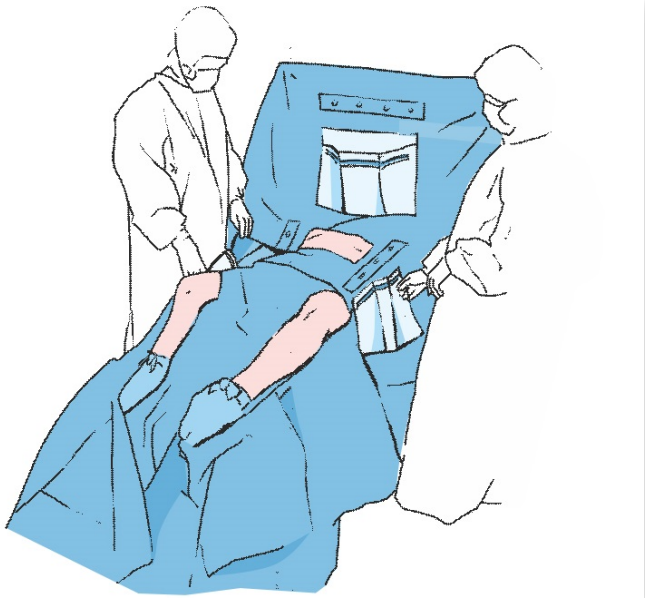

In final, indepartati hartia de protectie de pe pungile din film si lipiti-le pe camp.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026