
Pregatirea setului de craniotomie Matodrape

1



Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set peste.

2

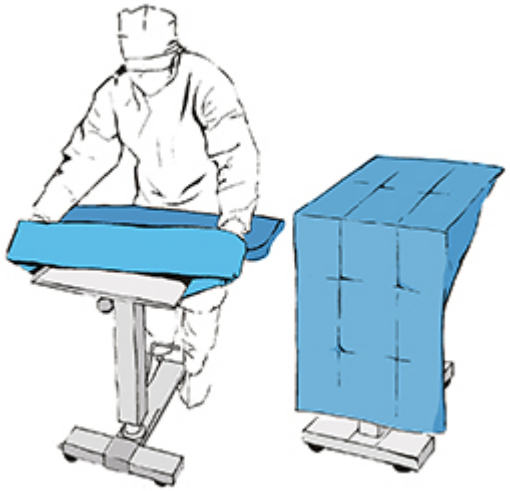

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3



Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4

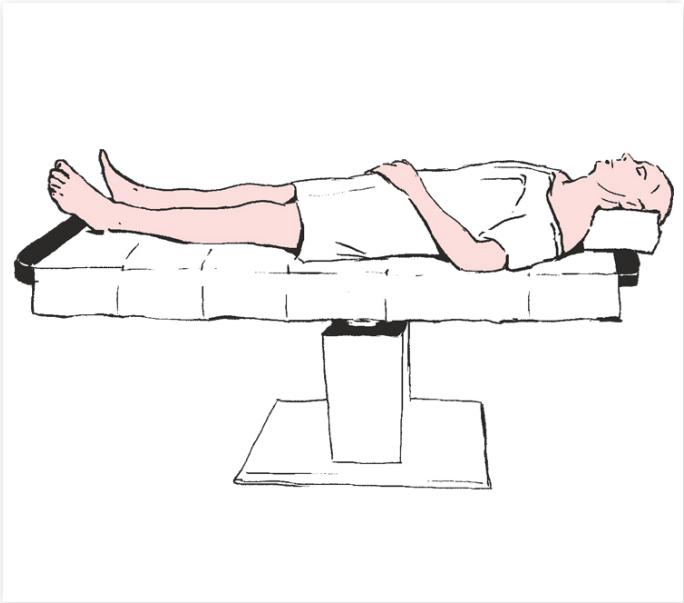


»

5

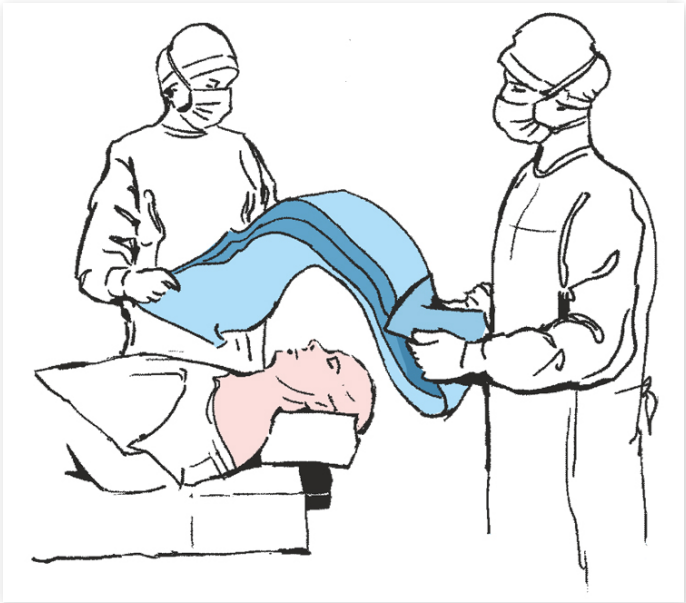

Se desfac marginile campului in 2 persoane, deasupra capului pacientului astfel incat acestea sa atarne liber peste masa de operatie, ...


6

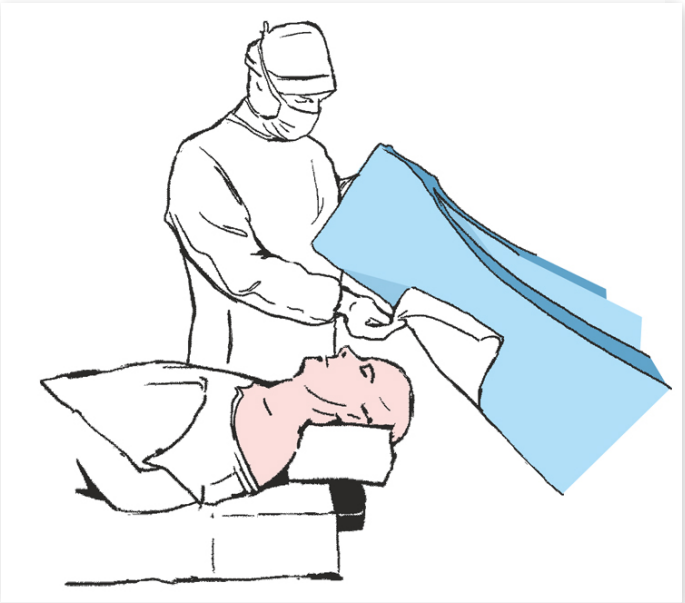

... apoi indepartati hartia de protectie care acopera filmul chirurgical de pe deschiderea campului principal ...


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

7

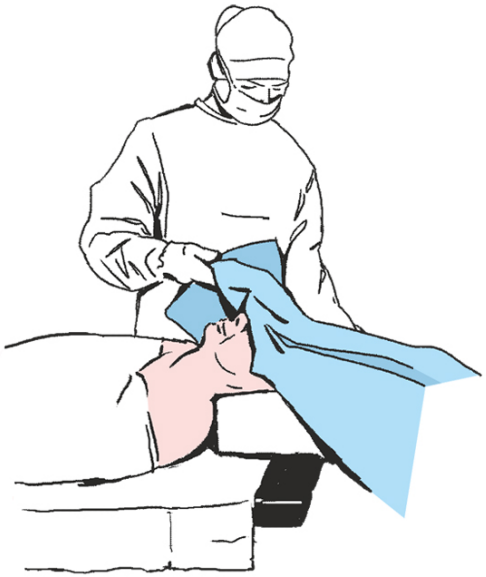

... si lipiti partea superioara, astfel incat sa determinati campul operator.

8

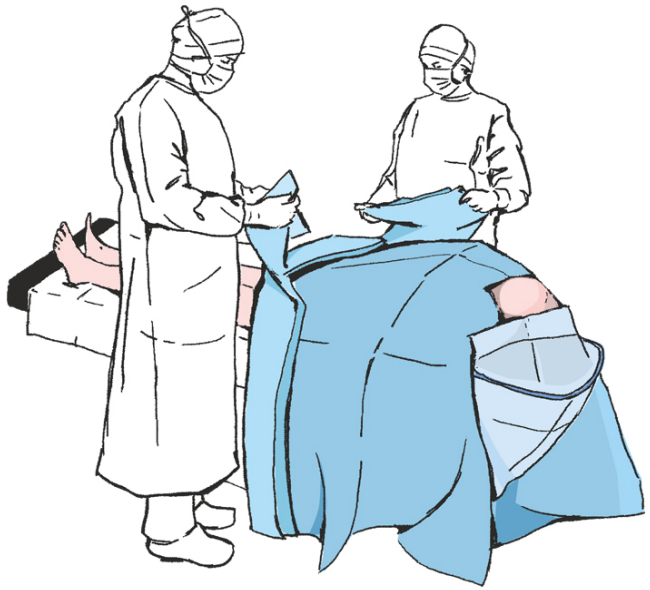


Desfaceti partea inferioara a campului spre capatul inferior al mesei de operatie , acoperind picioarele pacientului.

9

Apoi apasati filmul chirurgical in locul unde este aplicat adezivul pentru a-l fixa mai bine pe pielea pacientului. Desfaceti partea superioara a campului si potriviti orificiul in punga de colectare a lichidului.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

10

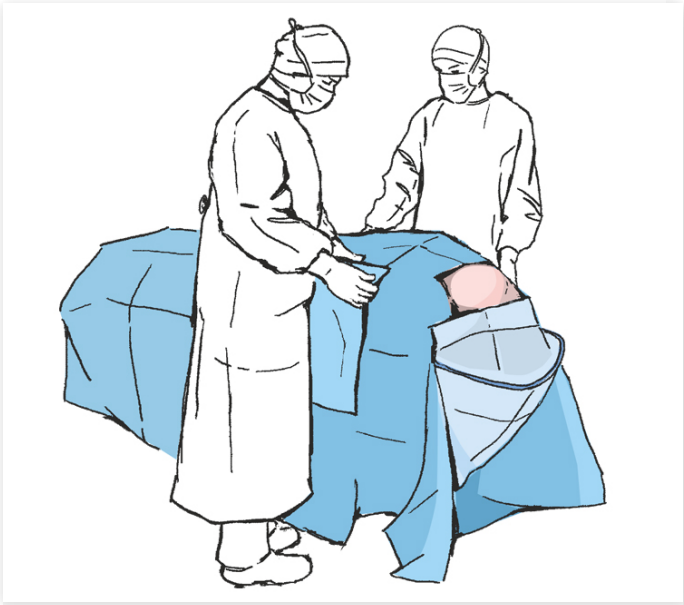


In dreapta si in stanga campului operator, lipiti suplimentar campurile cu benzi adezive , indepartand hartia de protectie.

11



Pe partea laterala a campului atasati o punga din film care sa permita acumularea fluidelor ce curg din rana chirurgicala.


12

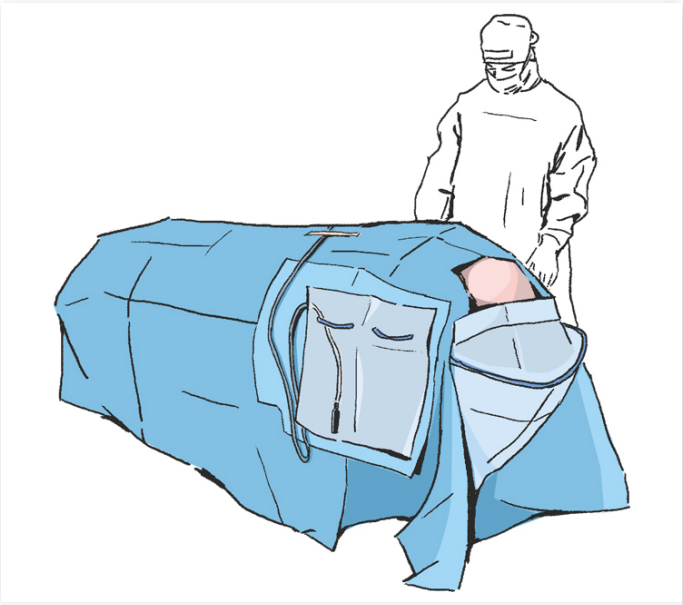

Fixati benzile adezive cu velcro in partea superioara a campului pentru a organiza cablurile utilizate in timpul procedurii.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

13

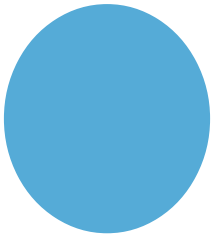

In final, conectati tubul la supapa din punga de colectare a lichidului.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026