

Pregatirea setului de cistoscopie Matodrape

1

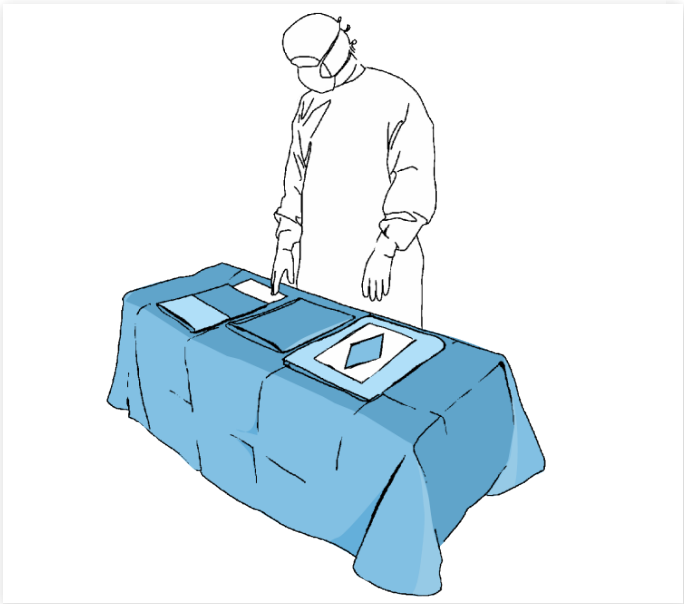

Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

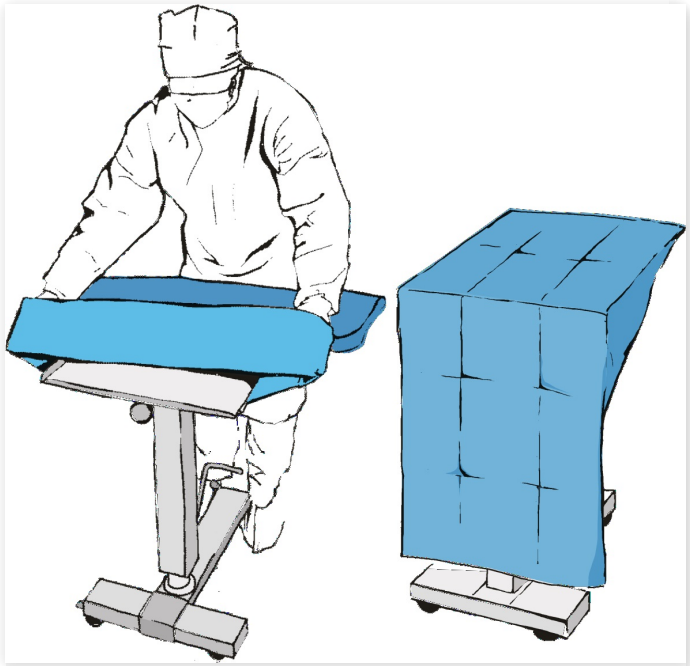

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.

3



Asezati campul mai mic sub fesele pacientului, aflat in pozitie urologica/ ginecologica.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4



Acoperiti picioarele pacientului cu husele speciale.

5



Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.


6



Indepartati hartia de protectie de pe campul cu banda adeziva.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

7

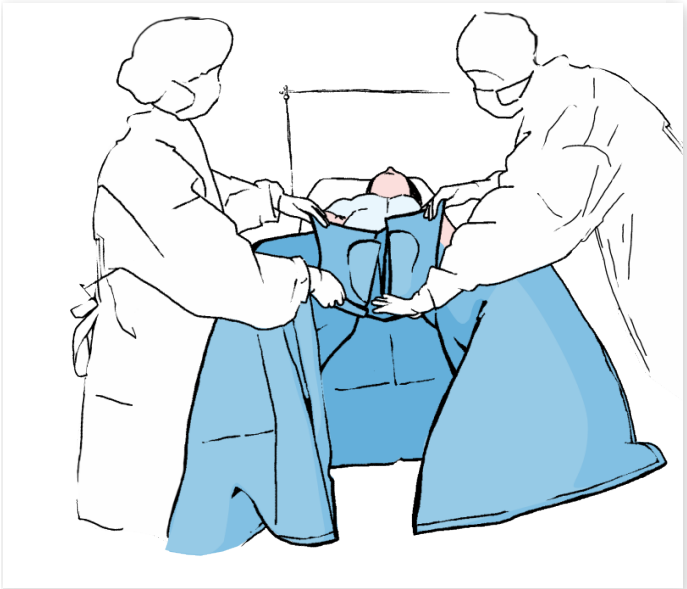


Asezati campul pentru a determina marginile campului operator, apoi apasati in zona cu banda adeziva pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului.

8

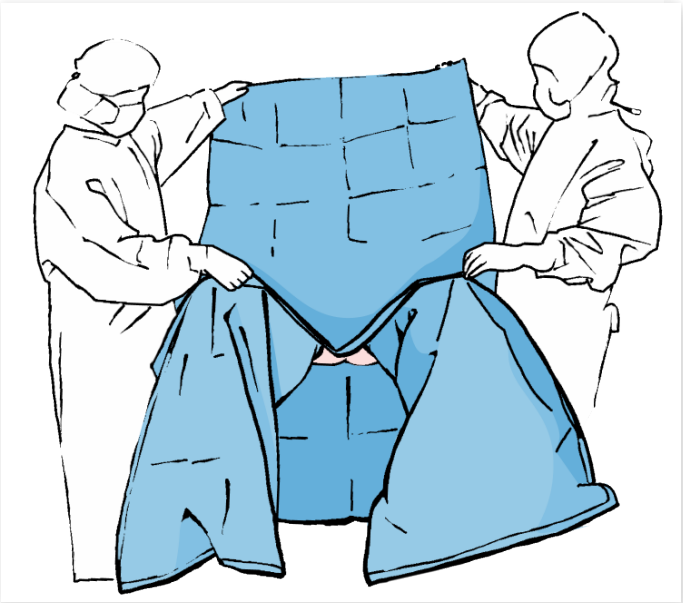

Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului spre capul pacientului si spre monitorul de anestezie, trecand campul peste el si formand astfel un paravan.

9

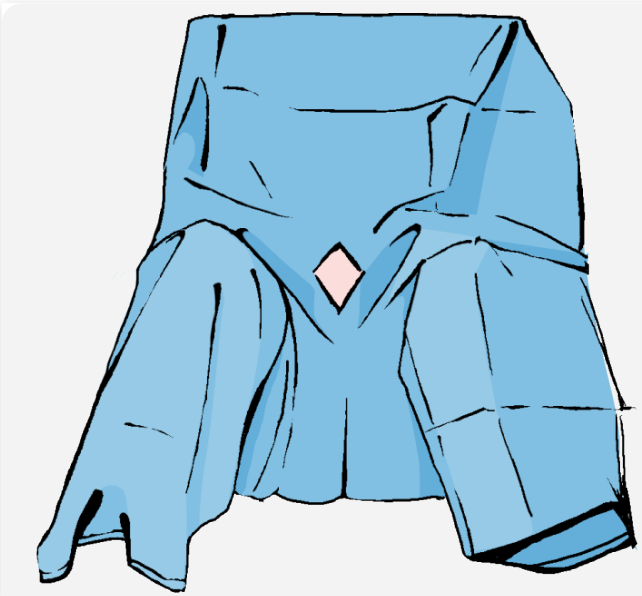

Desfaceti partea inferioara a campului, partial printre picioarele pacientului, spre capatul inferior al mesei de operatie.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026