

Pregatirea setului de sold Matodrape

1

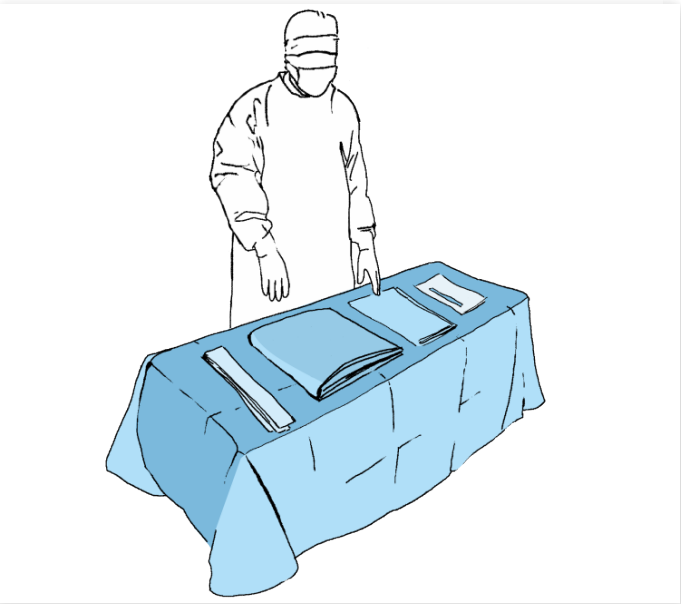


Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

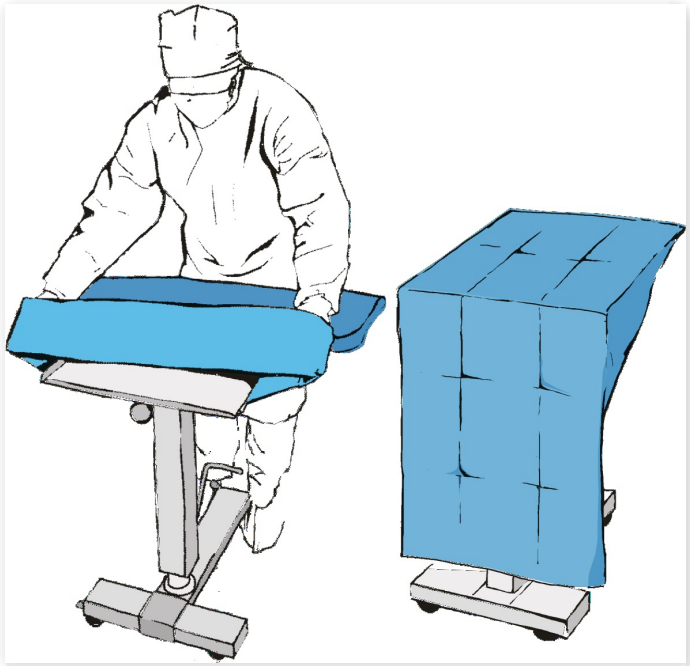

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3

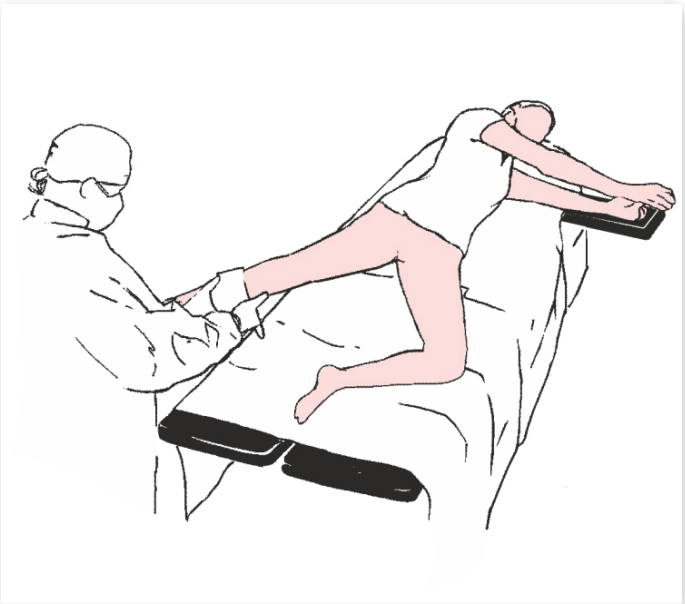

Folosind prosoapele din set ridicati piciorul ce va fi supus interventiei.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4

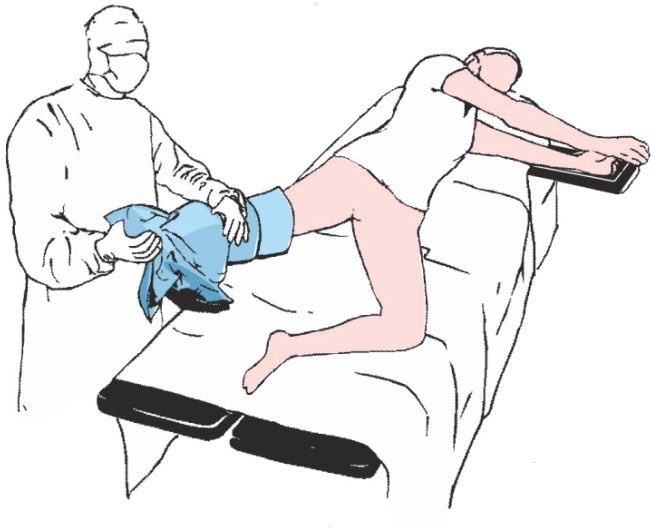


Asezati husa speciala pe picior pana sub articulatia soldului.

5

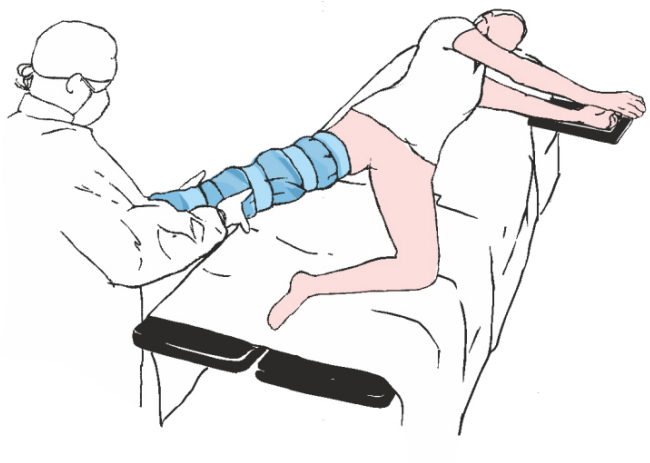

Fixati husa folosind benzile adezive.


6

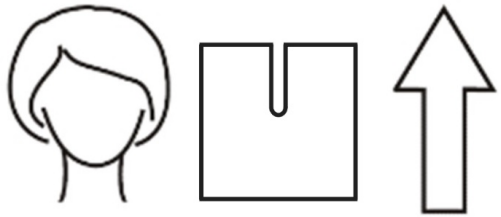

Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

7

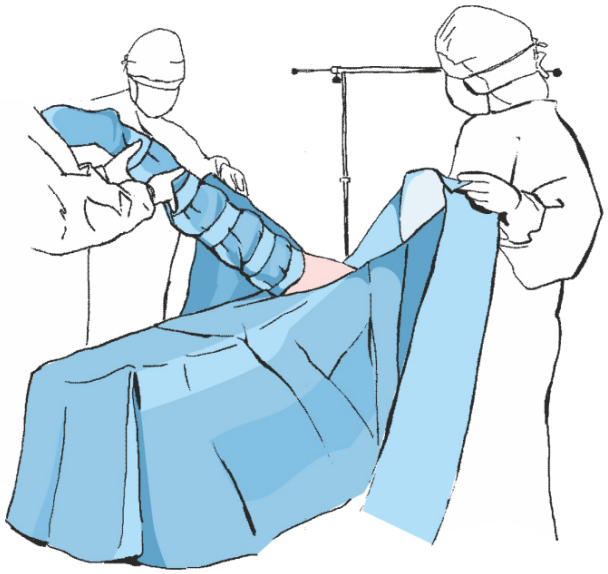


Asezati campul cu decupajul "U" sub soldul pacientului. Indepartati hartia de protectie de pe partea mai scurta a benzii adezive si lipiti-o ferm in zona inghinala a pacientului, apoi desfaceti partea inferioara a campului peste picioarele pacientului.

8

Indepartati si restul hartiilor de protectie si acoperiti soldul spre capul pacientului, delimitand marginile laterale ale campului operator. Presati in zona aderenta pentru o fixare mai buna pe pielea pacientului.


9

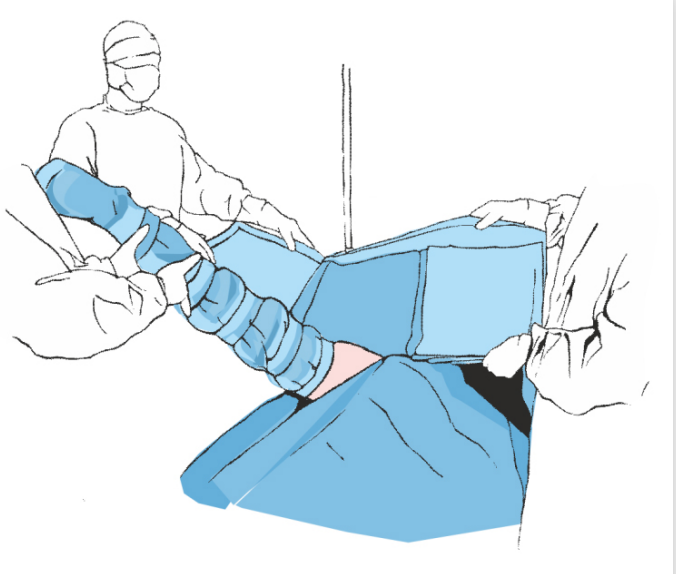

Indepartati hartia de protectie de pe campul superior, lipiti fara a forma cute si pentru a determina marginea de sus a campului operator.


©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

10

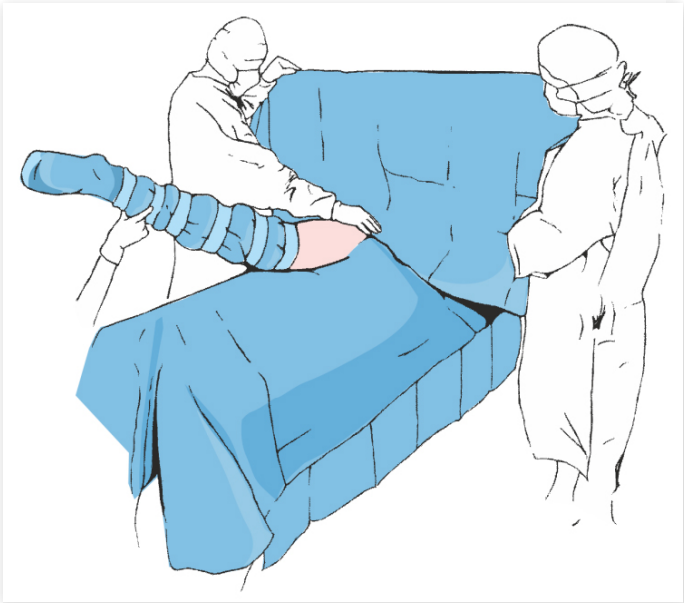


Presati in zona aderenta pentru o fixare mai buna pe pielea pacientului. Desfaceti campul in directia sagetilor, trecand peste monitorul de anestezie si formand un paravan.

11

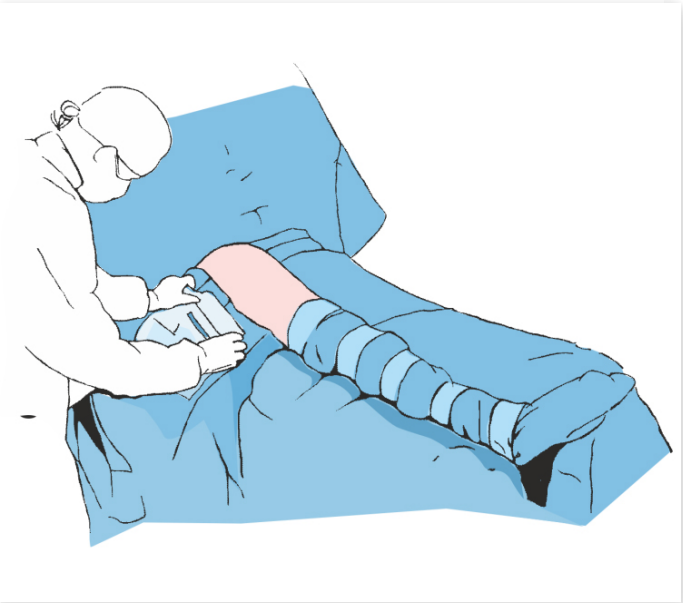

In final, atasati o unga din film sub campul chirurgical pentru a colecta fluidele scurse din rana chirurgicala.

12

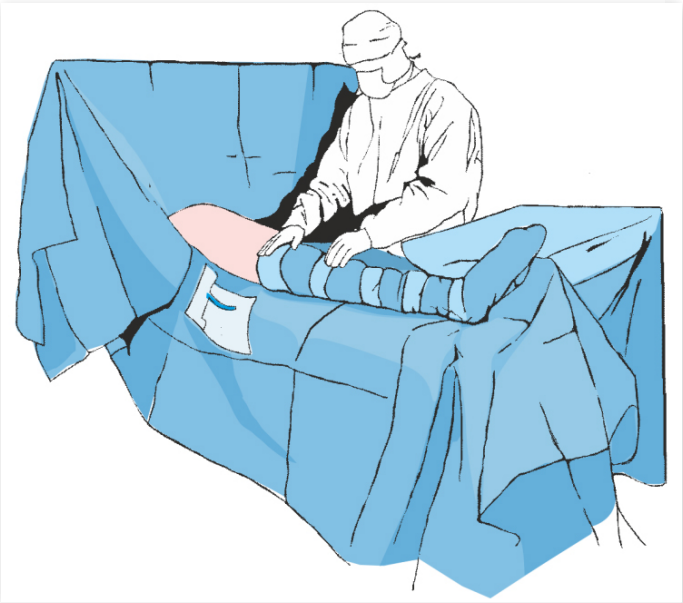

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026