

Pregatirea setului de artroscopie genunchi Matodrape

1

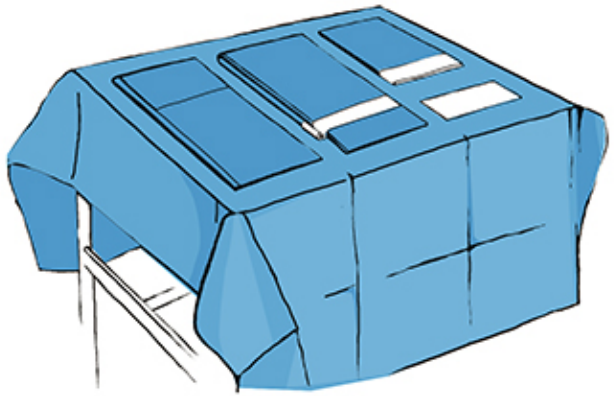

Setul desfacut se pune pe masa de instrumente. Se foloseste campul exterior pentru protejarea mesei si a componentelor ramase. Se aseaza componentele pe masa in functie de pictogramele de pe campuri(acestea indica locul plasarii fiecarei componente)

2

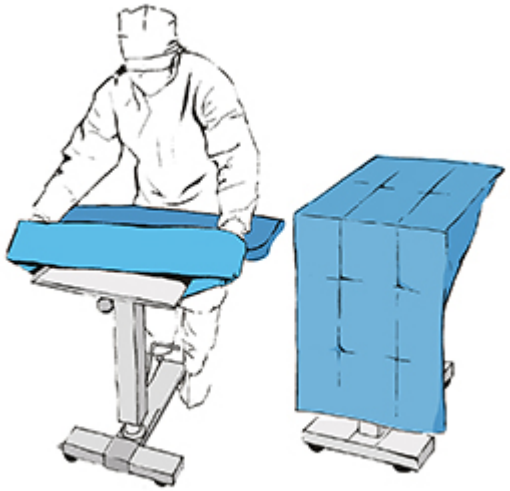

Se acopera masa Mayo cu husa speciala.


3



Se insafoara piciorul pacientului cu campul specific si se fixeaxa sub genunchi cu ajutorul benzilor adezive.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026

4

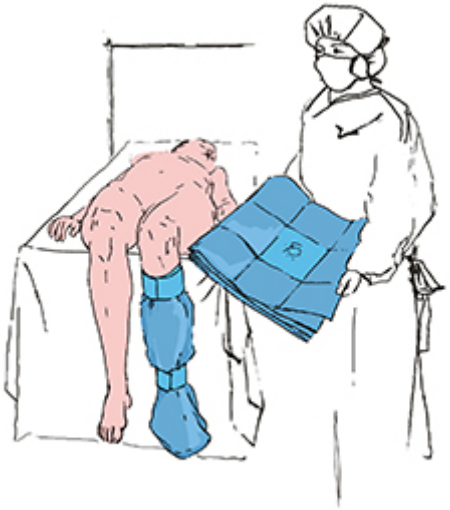


Se desface campul care este impaturit la jumatate. Campul este impaturit in asa fel incat deschizatura cu element elastic, este vizibila.

5



Se pune piciorul pacientului prin deschizatura elastica din camp (se trage in sus pe coapsa) si prin deschizatura elastica din punga, care se fixeaza sub genunchi.

6

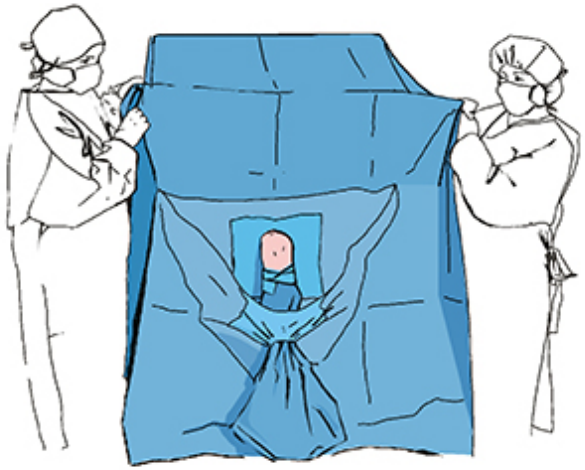

Se acopera pacientul cu restul campului. Se fixeaza, din dreptul capului pacientului pana la monitorul de anestezie, folosind benzile adezive din colturile campului.

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026